

QUIGG

Rugverwarmingsband

GT-LBH-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE
☎ 0900 / 44 666 44
💻 gt-support@teknihall.be
ART.-NR.: 2004184

GEBRUIKSAANWIJZING



2003020041846
P051030224

Inhoud

Algemeen	1	Gebruik	8
Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren	1	De aansluiting van de besturingseenheid aan de band aansluiten	8
Legenda	1	Omdoen van de rugverwarmingsband	8
Veiligheid	2	Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen	8
Gebruik volgen de voorschriften	2	Tijdsduur instellen	9
Gevaar door elektriciteit	2	Na het gebruik	9
Gevaar voor schade aan de gezondheid	4	Schoonmaken en onderhoud	10
Gevaar voor ongevallen	4	Opbergen	10
Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen	5	Storing en storing verhelpen	11
Omvang van de levering/ Onderdelen product	6	Technische specificaties	11
Voor het eerste gebruik	7	Conformiteitsverklaring	12
Uitpakken	7	Afvoeren	12
		Verpakking afvoeren	12
		Weggooiën van oude apparaten	12

ALGEMEEN

Gebruiksaanwijzing lezen en bewaren

Belangrijke instructies. Bewaren voor later gebruik.

Om de optimale werking en prestaties van dit artikel op elk moment te garanderen en om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen, hebben we een verzoek aan u:



lees voor het eerste gebruik van het apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en neem vooral de veiligheidsinstructies in acht!

Alle werkzaamheden aan en met dit artikel mogen alleen worden uitgevoerd voor zover ze beschreven zijn in de gebruiksaanwijzing.

Wanneer u deze gebruiksaanwijzing niet volgt, kan dit ernstige letsels of schade aan dit artikel tot gevolg hebben.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij. Deze originele gebruiksaanwijzing kan ook als pdf-bestand van onze homepage www.gt-support.de worden gedownload.

Legenda

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing, op het artikel of op de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING! Dit signaalsymbool/-woord duidt op een gevaar met een gemiddeld risiconiveau dat, indien het niet wordt vermeden, kan leiden tot de dood of een ernstig letsel.



VOORZICHTIG! Dit signaalsymbool/signaalwoord duidt op een gevaar met een laag risiconiveau, dat, indien niet vermeden, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Dit signaalsymbool/-woord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u nuttige bijkomende informatie over de installatie of over de bediening.



Beschermingsklasse II: versterkte of dubbele isolatie tussen actieve en aanraakbare delen. Meestal is er geen verbinding met de randarde.



Instructies lezen



Alleen geschikt voor gebruik binnen.



Wassen op max. 30 °C in het programma voor de fijne was



Niet wassen (bedieningsgedeelte)



Niet bleken



Niet in de droogtrommel drogen



Niet strijken



Niet chemisch reinigen



Geen naalden insteken



Niet samengevouwen of samengeduwd gebruiken



Niet voor gebruik door zeer jonge kinderen (0 - 3 jaar) geschikt



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk 'Conformiteitsverklaring'): met dit symbool gemarkeerde producten voldoen aan alle toe te passen Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Het zegel "Veiligheid gekeurd" (GS-tekens) bevestigt dat het artikel voldoet aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet.



Op schadelijke stoffen getest artikel

Veiligheid

Gebruik volgens de voorschriften

- Dit artikel is ontworpen voor huishoudelijk gebruik zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- De rugverwarmingsband mag niet als onderlegger worden gebruikt.
- Het is niet geschikt voor medisch gebruik in ziekenhuizen, praktijken, enz.
- Het artikel is geen medisch hulpmiddel en is niet geschikt voor therapeutische doeleinden.

- Baby's, kleine kinderen, hulpeloze of personen die niet gevoelig zijn voor warmte en dieren mogen niet worden verwarmd met de rugverwarmingsband.
- Dit artikel mag alleen worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis.

Gevaar door elektriciteit



Het bedieningsgedeelte en de stekkers mogen niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water. Nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Als er vloeistof is binnengedrongen, bestaat er gevaar voor elektrische schokken.

Gebruik de warmteband na het wassen pas als hij helemaal droog is.

- Reinig de rugverwarmingsband bij normale en zware vervuiling op maximaal 30°C (in het programma fijne was en met het laagste aantal omwentelingen bij het centrifugeren).
- Sluit de rugverwarmingsband aan op een goed geïnstalleerd stopcontact waarvan de spanning overeenkomt met de "Technische specificaties".

- Gebruik alleen het bijgeleverde bedieningsgedeelte om de rugverwarmingsband te bedienen.
 - Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is zodat u indien nodig snel de stekker uit het stopcontact kunt trekken.
 - Gebruik de rugverwarmingsband niet:
 - als de rugverwarmingsband, het netsnoer, de regeleenheid of de stekker beschadigd zijn,
 - als de rugverwarmingsband vochtig is.
 - Wikkel het netsnoer voor het aansluiten helemaal af. Let er daarbij op dat het netsnoer niet door scherpe randen of hete voorwerpen wordt beschadigd.
 - Zorg ervoor dat overtollige drempels en elektrische leidingen op een veilige manier zijn aangebracht.
 - Als het netsnoer van de rugverwarmingsband beschadigd is, dient het om gevaren te voorkomen te worden vervangen door de fabrikant, zijn klantendienst of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
- Trek de stekker uit het stopcontact:
 - als u de verwarmingsfunctie niet gebruikt,
 - na elk gebruik,
 - voordat u de rugverwarmingsband schoonmaakt of opbergt,
 - als er tijdens het gebruik een duidelijke storing optreedt,
 - tijdens een onweersbui.
 Trek dan altijd aan de stekker, niet aan de voedingskabel.
 - Wijzig niets aan de rugverwarmingsband of aan de aansluitkabel. Laat reparaties alleen door een gespecialiseerde werkplaats uitvoeren. Niet vakkundig gerepareerde apparaten brengen de gebruiker in gevaar. Houd u ook aan de bijgevoegde garantievoorwaarden.
 - Gebruik voor het aansluiten van de rugverwarmingsband uitsluitend de bijgeleverde regeleenheid type GT-LBH-01.
 - Gebruik alleen de origineel meegeleverde kabel om het rugverwarmingskussen aan te sluiten.
 - Volg de instructies voor de opslag van het apparaat zoals beschreven in het hoofdstuk "Opslag".

Gevaar voor schade aan de gezondheid

⚠ VOORZICHTIG! Langdurig gebruik op de hoogste stand kan leiden tot huidirritatie.

- Kies bij langer gebruik (90 minuten, daarna schakelt de rugverwarmingsband automatisch uit) een lage verwarmingsstand (1 of 2). Deze instelling wordt bijvoorbeeld aanbevolen als u zich moe voelt en tijdens het gebruik in slaap zou kunnen vallen.
- Als u de warmte van de rugverwarmingsband onangenaam of pijnlijk vindt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het rugverwarmingskussen. Raadpleeg een arts voordat u het weer gebruikt.
- De rugverwarmingsband mag niet worden gebruikt door personen of personen die bescherming behoeven, die ongevoelig zijn voor warmte of die niet op oververhitting kunnen reageren.

Gevaar voor ongevallen

- Vermijd het gebruik van verlengsnoeren. Er is een verhoogd risico op struikelen door rondslingerende kabels.
- Schakel de rugverwarmingsband niet in als dit gevouwen of samengedrukt is.
- Gebruik de rugverwarmingsband niet als warme onderlegger door erop te gaan zitten of het bijv. onder een beddenlaken te leggen.
- De rugverwarmingsband mag niet ingeklemd, scherp geknikt of in een vochtige toestand worden ingeschakeld.
- Leg tijdens het gebruik geen grote of zware voorwerpen zoals koffers, wollen dekens of plaids en tassen op de rugverwarmingsband.
- De rugverwarmingsband is onderhevig aan een normale veroudering. Controleer daarom voor elk gebruik of de rugverwarmingsband, de regeleenheid en het netsnoer tekenen van slijtage of beschadiging vertonen. Als dergelijke signalen aanwezig zijn of als de rugverwarmingsband niet correct is gebruikt, moet dit door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd voordat u de band weer in gebruik neemt.

- Steek geen naalden of andere spitse voorwerpen in de rugverwarmingsband.
- Bewaar de rugverwarmingsband altijd op een droge plaats. Bescherm de band tegen warmtebronnen.
- De rugverwarmingsband mag niet chemisch worden gereinigd, geman-geld, uitgewrongen of gestreken. Volg de instructies voor reiniging en onder-houd.
- De rugverwarmingsband mag niet nat worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen en een meer uitgebreide groep personen




Houd verpak-kingszakken en beschermfolies uit de buurt van ba-by's en peuters, er bestaat verstik-kingsgevaar! Let er ook op dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan

ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het product op een veilige manier en zij de gevaren ervan begrijpen.

- Kinderen mogen niet met dit artikel spelen. Laat kinderen of personen die hulp nodig hebben niet zonder toe-zicht elektrische apparaten gebruiken.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- De rugverwarmingsband mag niet wor-den gebruikt door jonge kinderen (3-8 jaar), tenzij de regeleenheid vooraf is ingesteld door een ouder of een toe-zichthoudend persoon of tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd hoe de rug-verwarmingsband veilig kan worden bediend via de regeleenheid. In dit ge-val dient het apparaat altijd op de mini-mumtemperatuur te worden ingesteld.
- Kinderen jonger dan drie jaar mogen de rugverwarmingsband niet gebrui-ken omdat ze niet in staat zijn om te reageren op een eventuele oververhit-ting.

OMVANG VAN DE LEVERING/ONDERDELEN PRODUCT

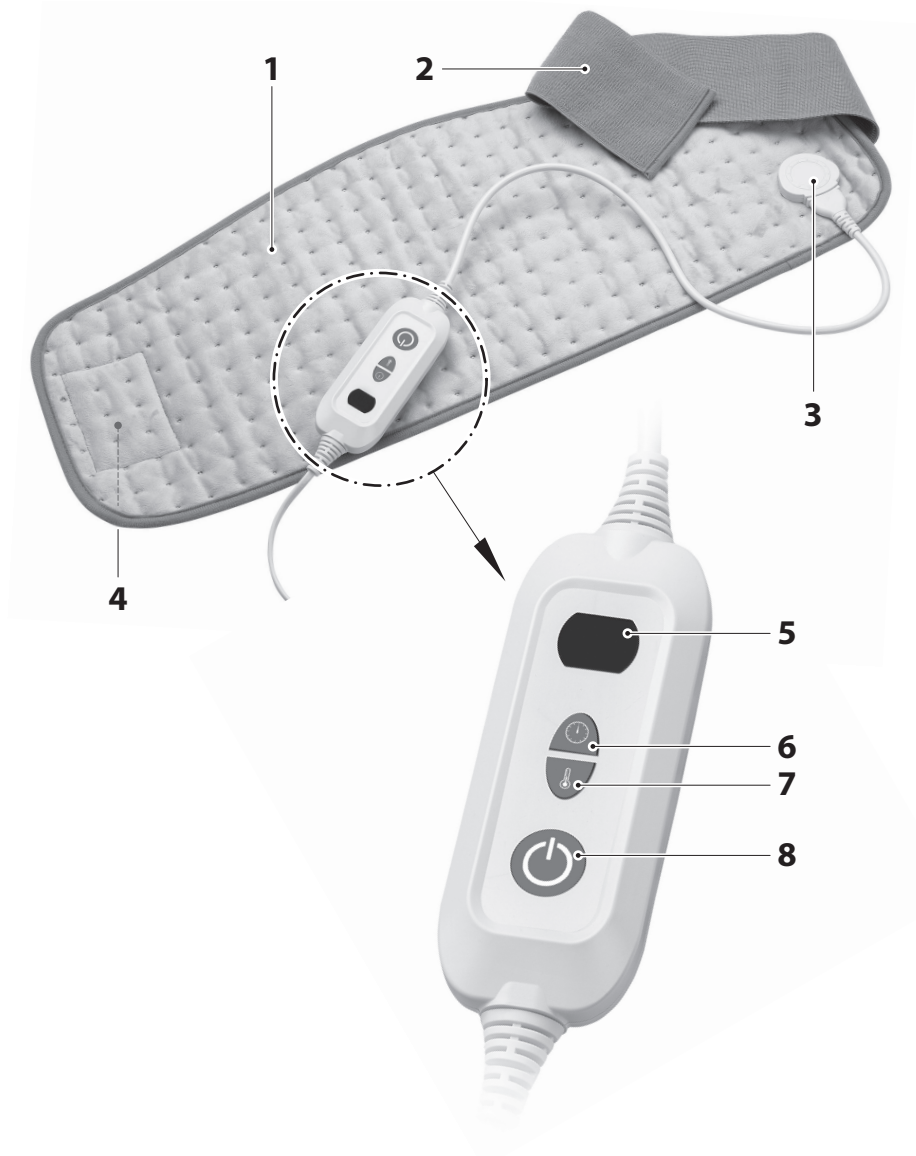

OMVANG VAN DE LEVERING/ ONDERDELEN PRODUCT

- 1** Warmtekussen voor de rug en de buik (binnenkant)
- 2** Elastische buikgordel
- 3** Aansluitbus voor stekker van besturingseenheid (vormstekker kan alleen uitgelijnd worden ingestoken)
- 4** Klittenbandsluiting voor de buikgordel (op de achterkant)
- 5** Display
- 6** Toets om de tijdsduur in te stellen
- 7** Toets om de verwarmingsstand in te stellen
- 8** Toets **AAN/UIT** (⏻)
 - Originele gebruiksaanwijzing
 - Garantiebewijs

Voor het eerste gebruik Uitpakken

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan het artikel beschadigd raken.

1. Neem het artikel en de accessoires uit de verpakking. Controleer of het artikel volledig is.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel het netsnoer helemaal af.
3. Controleer of de levering volledig is. Controleer of de afzonderlijke delen beschadigingen vertonen. Als dit het geval is, gebruik het item dan niet. Wend u daarvoor tot het serviceadres dat op de garantiekaart staat aangegeven.
3. Controleer voor u het apparaat de eerste keer gebruikt of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw huishouden.
4. Reinig het bedieningsonderdeel voor het eerste gebruik met een licht bevochtigde doek om mogelijke verpakkings- en productieresten te verwijderen.



Verwijder eventueel de beschermfolie van het display van het bedieningsgedeelte.


Gebruik

De aansluiting van de besturingseenheid aan de band aansluiten

OPMERKING! Gevaar voor schade!

Houd de band niet vast bij het loskoppelen of aansluiten van de aansluitstekker.

Om los te koppelen of aan te sluiten houdt u de aansluitbus vast (zie illustratie).

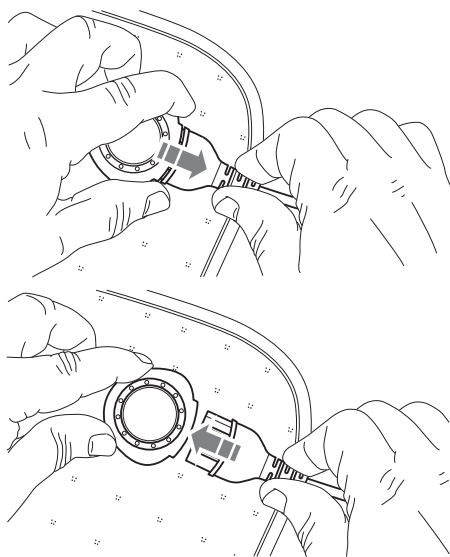

i Om aan te sluiten kan het nodig zijn de stekker te draaien (de vormstekker kan alleen uitgelijnd worden ingestoken).

Omdoen van de rugverwarmingsband

1. Leg de rugverwarmingsband om uw rug. Zorg ervoor dat de aansluitbus met de reeds aangesloten stekker van de besturingseenheid zich aan de binnenkant (tegen het lichaam) aan de linkerkant bevindt.
2. Leg nu de band aan de rechterkant van uw lichaam en maak de band vervolgens vast met de elastische buikgordel en de klittenbandsluiting.



U kunt de pasvorm naar wens aanpassen met de elastische tailleband.

Aan-/uitschakelen en temperatuur instellen



Als de stekker in het stopcontact wordt gestoken voordat het bedieningsgedeelte op de band is aangesloten, verschijnt er een knipperende **F** (fout) op het display. Haal in dat geval eerst de netstekker uit het stopcontact en sluit de verbindingstekker van de besturingseenheid aan op de band.

1. Steek de netstekker in op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact dat overeenkomt met de "Technische specificaties".
2. Druk op de knop  om de rugverwarmingsband in te schakelen.
3. Druk herhaaldelijk op de toets  totdat de gewenste verwarmingsstand op het display wordt weergegeven:
 - 1 - 3 lage warmte
 - 4 - 6 matige warmte
 - 7 - 9 hoge warmte

 Als achter het ingestelde warmteniveau op het display een punt oplicht, is de rugverwarmingsband aan het opwarmen. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, dooft het punt. Dit proces kan tijdens het gebruik verschillende malen worden herhaald.

Dek het bedieningsgedeelte tijdens het gebruik niet af of bedek het ook niet. Leg het naast u.

4. Om de verwarmingsfunctie te beëindigen, drukt u nogmaals op de toets . Het scherm dooft.

 Om de rugverwarmingsband snel op te warmen, dient u verwarmingsstand 9 te kiezen.

Als u de rugverwarmingsband gedurende langere tijd wilt gebruiken, raden wij u aan om verwarmingsstand 1 of 2 in te stellen.

Tijdens het gebruik kunt u op elk moment een hogere of lagere verwarmingsstand instellen door op de knop  te drukken.

De rugverwarmingsband schakelt uit als de toets  per ongeluk ca. 30 seconden ingedrukt wordt gehouden terwijl deze uitgeschakeld is. Dit voorkomt oververhitting als u bijv. per ongeluk op het bedieningsgedeelte gaat zitten.

Tijdsduur instellen

 U kunt een tijdsduur instellen waarna de rugverwarmingsband zich automatisch uitschakelt.

1. Stel de gewenste verwarmingsstand in.
2. Stel de gewenste tijdsduur in door herhaaldelijk op de toets  te drukken:

Stand 1 = 10 minuten

Stand 2 = 20 minuten

...

...

Stand 9 = 90 minuten

Na het gebruik

1. Druk op de knop  om de rugverwarmingsband uit te schakelen.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Trek de stekker van de besturingseenheid uit de rugverwarmingsband.

 Hierdoor wordt voorkomen dat per ongeluk aan de aansluitbus van de band wordt getrokken of dat de aansluitbus scheurt - Gevaar voor schade!

Schoonmaken en onderhoud



Haal de stekker uit het stopcontact en haal de stekker van de besturingseenheid van de band voordat u de rugverwarmingsband schoonmaakt.

Het bedieningsgedeelte mag niet in water worden ondergedompeld.

1. Veeg indien nodig het bedieningsgedeelte schoon met een licht bevochtigde zachte doek.
2. Verwijder indien nodig kleinere vlekken van de rugverwarmingsband met een licht bevochtigde doek.
3. Reinig de rugverwarmingsband bij normale en zware vervuiling op maximaal 30°C (in het programma fijne was en met het laagste aantal omwentelingen bij het centrifugeren).



Volg de onderhoudssymbolen op het etiket van de rugverwarmingsband s.

Het rugverwarmingskussen door het wassen in de wasmachine zwaar belast. Het rugverwarmingskussen mag in de loop van de tijd niet vaker dan vijfmaal in totaal worden gewassen.

Was het rugverwarmingskussen niet samen met ander textiel dat voorzien is van metalen knopen, klinknagels of ritssluitingen. Het rugverwarmingskussen kan beschadigd worden.

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

De rugverwarmingsband niet uitwringen! Gebruik geen wasknijpers of iets dergelijks en hang de band niet op.

4. Spreid de band uit (bijv. op een handdoek) en laat hem na het wassen volledig aan de lucht drogen.



Gebruik de verwarmingsfunctie niet om de rugverwarmingsband te drogen.

5. Gebruik de rugverwarmingsband pas weer als hij helemaal droog is.

Opbergen

OPMERKING!

Gevaar voor schade!

De rugverwarmingsband niet samenvouwen! Dit zou het verwarmingsdraden kunnen beschadigen.

Laat de rugverwarmingsband volledig afkoelen voordat u de band oprolt en opbergt.

Bewaar de band op een schone en droge plaats waar hij beschermd is tegen andere warmtebronnen bijvoorbeeld een verwarmingselement.

Bewaar geen zware voorwerpen bovenop de opgerolde rugverwarmingsband en buig deze niet.

Storing en storing verhelpen

Storing	Mogelijke oorzaak en remedie
Werkt niet.	- Stekker in het stopcontact? Stekker aan een onder spanning staand stopcontact aansluiten. - De stekker van de besturingseenheid is niet correct verbonden met de aansluitbus van het verwarmingskussen. Stekker van de besturingseenheid volledig in de aansluitbus drukken.
Bediening niet mogelijk.	- Knipperende F op het display Verkeerde aansluitvolgorde. Eerst de stekker van de besturingseenheid op de aansluitbus van de rugverwarmingsband aansluiten, vervolgens de netstekker op de stroomvoorziening aansluiten. - Er is een technische fout opgetreden. Trek de netstekker uit het stopcontact en laat de rugverwarmingsband volledig afkoelen. Na het afkoelen kunt u het verwarmingskussen weer normaal gebruiken. Als dit niet mogelijk is, is de rugverwarmingsband vanwege de elektrische veiligheid uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt.
Verwarmingskussen/dis- play wordt uitgeschakeld.	- Geen fout. U kunt een tijdsduur instellen waarna de warmtefunctie automatisch uitschakelt. Zie tijdsduur instellen.

Technische specificaties

Revisienummer:	2021_01
Stroomvoorziening:	230 V-, 50 Hz
Vermogen:	100 W
Beschermingsklasse:	II/ 
Verwarmingsstanden:	9
Uitschakelniveaus (timerniveaus):	9 (10, 20, ... of 90 minuten)
Materiaal:	100 % polyester

Conformiteitsverklaring



De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gegarandeerd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**

Afvoeren

Verpakking afvoeren



Gooi de verpakking soort bij soort weg. Leg karton en kartonnen dozen bij het oud papier en breng folie naar de inzameling van herbruikbare materialen.

Weggoeien van oude apparaten

(toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor gescheiden inzameling van recyclebare materialen)



Oude apparaten mogen niet bij het huisvuil!

Mocht het apparaat ooit niet meer kunnen worden gebruikt, dan is iedere gebruiker wettelijk verplicht, oude apparaten gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn of haar gemeente/zijn of haar wijk, af te geven. Hiermee wordt gewaarborgd dat oude apparaten deskundig worden verwerkt en negatieve effecten op het milieu worden vermeden.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44

 gt-support@teknihall.be

ART.-NR.: 2004184

Globaltronics Service Center

c/o teknihall Benelux bvba

Brusselstraat 33

2321 Meer

Belgium

Verkocht door (Geen serviceadres):

Globaltronics GmbH & Co. KG

Bei den Mühren 5

20457 Hamburg, Duitsland