

QUIGG

Oplaadbare tandenborstel

GT-TBs-01



3 Jaar
GARANTIE

KLANTENSERVICE	
☎	0900 / 44 666 44
💻	gt-support@teknihall.be
ART.-NR. 7573	09W0/2016

GEBRUIKSAANWIJZING





23075733
09W0/2016
P051000402


INHOUD


Symbolen	2
Veiligheidsvoorschriften	3
Naam van de delen / Levering	7
Voor het eerste gebruik	8
Bediening	10
Vervangende borstelkoppen voor tandenborstels	13
Storing en remedie	13
Technische specificaties	13
Conformiteitsverklaring	14
Afvoer	14


SYMBOLLEN


 **WAARSCHUWING!** Duidt op een gevaar met middelmatig risico, dat tot de dood of zwaar letsel kan leiden, als het niet vermeden wordt.

 **OPMERKING!** Als de voorschriften niet worden nageleefd, kan dit leiden tot materiële schade.

 **INFO!** Staat voor aanwijzingen en verklaringen.

 **WEEE-aanduiding** Het artikel mag niet met het huisvuil worden weggegooid.

 **Batterijterugname** Nikkel-metaalhybride-accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

 Met dit symbool gekenmerkte producten voldoen aan alle toepasselijke Gemeenschapsvoorschriften van de Europese Economische Ruimte.

IP67 Dit artikel is stofdicht en beschermd tegen tijdelijke onderdompeling.



VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

Lees en volg deze gebruiksaanwijzing volledig voordat u het artikel gebruikt en bewaar ze, voor het geval dat u later iets wilt nalezen.

Als u het artikel aan iemand anders doorgeeft, doe er dan ook deze gebruiksaanwijzing bij.

Voorschriftmatig gebruik

Het artikel dient om tanden te poetsen en is alleen geschikt voor het privéhouishouden. Het is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik.

Het artikel mag alleen met de meegeleverde accessoires en passende opzetborstels worden gebruikt.

Gevaar voor kinderen en een uitgebreidere kring personen

Dit artikel kan door kinderen en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, als er toezicht op hen is. Of als ze geleerd hebben hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij er toezicht op hen wordt gehouden.

Houd kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal. Bij inslikken is er gevaar voor verstikking. Let er ook op, dat de zak van de verpakking niet over het hoofd wordt getrokken.

Kinderen mogen niet met het artikel spelen.

Gevaar door elektriciteit

⚠ WAARSCHUWING! **Gevaar voor een elektrische schok! Het artikel werkt met gevaarlijke spanning.**

De omgang met vloeistoffen in combinatie met elektrische apparaten vereist de hoogste aandacht!

Een veel voorkomende oorzaak van ongelukken in het huishouden is onoplettendheid bij routineprocedures. Let erop, dat uw handen steeds droog zijn als u de netstekker aansluit of eruit trekt.

Het laadstation mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of spatwater.

Het laadstation mag niet in water of andere vloeistoffen worden ge-

dompeld. Gevaar voor een elektrische schok! Gebruik het laadstation daarom ook niet in de buurt van vochtbronnen, zoals een wasbak, een badkuip of een douche.

Gebruik het artikel niet in de openlucht en stel het nooit bloot aan weersinvloeden zoals regen, sneeuw of vorst.

Sluit het laadstation aan op een naar behoren geïnstalleerd stopcontact, waarvan de spanning overeenkomt met die uit de technische specificaties.

Bij gebruik van een tussenstekker of verlengkabel moet deze voldoen aan de geldige veiligheidsvoorschriften. De aangegeven maximale stroomsterkte mag niet worden overschreden.

Let erop, dat het stopcontact goed toegankelijk is, zodat u de netstekker er zo nodig snel kunt uittrekken.

Gebruik het artikel niet:

- als het artikel beschadigd is,
- de stroomkabel of netstekker beschadigd is,
- et artikel op de grond gevallen is.

Wikkel de stroomkabel voor elk gebruik helemaal af. Let er daarbij op, dat de stroomkabel niet ingeklemd, geplet of door scherpe randen of hete voorwerpen beschadigd wordt.

Trek de netstekker uit het stopcontact:

- als u het laadstation niet gebruikt,
- na het laden,
- voordat u het artikel schoonmaakt of wegzet,
- als er tijdens het gebruik kennelijk een storing optreedt,
- bij onweer.

Trek daarbij steeds aan de netstekker, niet aan het netsnoer.

Breng geen veranderingen aan aan het apparaat of aan de stroomkabel.

Laat reparaties alleen door een vakwerkplaats uitvoeren. Let ook op de garantiebepalingen.

De stroomkabel van het laadstation kan niet worden vervangen. Bij beschadiging moet het artikel worden weggegooid.

Het handvat mag alleen met het meegeleverde laadstation worden opgeladen.

Het artikel mag niet op een tijdschakelklok of een apart op afstand werkend systeem, zoals een schemeringschakelaar of een radiostekkerdoos worden aangesloten.

Gevaar voor letsels door een andere oorzaak

Leg de stroomkabel zo, dat er niemand over kan struikelen.

Vervang versleten of beschadigde opzetborstels onmiddellijk, om beschadigingen in de mond en aan de tanden te voorkomen.

Materiële schade

Zet het artikel op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond. Let er op dat er een voldoende grote afstand is tot sterke warmtebronnen zoals kookplaten, verwarmingsbuizen e.a.

Vermijd warmteophoping en zet het artikel zo neer, dat de bij het gebruik optredende warmte rondom goed uit de behuizing kan wegvloeien.

Leg geen voorwerpen zoals doeken of tijdschriften op het laadstation. Brandgevaar!

Aan de onderkant van het artikel vindt u een voet die voorzien is van een rubberlaag. Omdat meubelen en vloeroppervlakken uit heel verschillende materialen bestaan en met de meest verschillende onderhoudsmiddelen behandeld worden, kan niet helemaal worden uitgesloten, dat sommige van deze stoffen componenten bevatten die de van een rubberlaag voorziene voet aantasten en zacht maken. Leg eventueel een antislip ondergrond onder het artikel.

Gebruik voor de reiniging geen agressieve chemische reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, harde sponzen o. d.

Aanwijzingen voor de accu


Accu's moeten weg van kinderen worden gehouden.

Als iemand een accu inslikt, moet hij of zij onmiddellijk medische hulp krijgen.

Stel accu's niet bloot aan extreme omstandigheden, leg ze bijv. niet op verwarmingselementen of direct in de zon. Verhoogd leeglooprisico!

Contact met huid, ogen en slijmvliezen moet worden vermeden. Bij contact met accuzuur moet u de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig schoon water afspoelen en onmiddellijk naar een arts gaan.

NAAM VAN DE DELEN / LEVERING

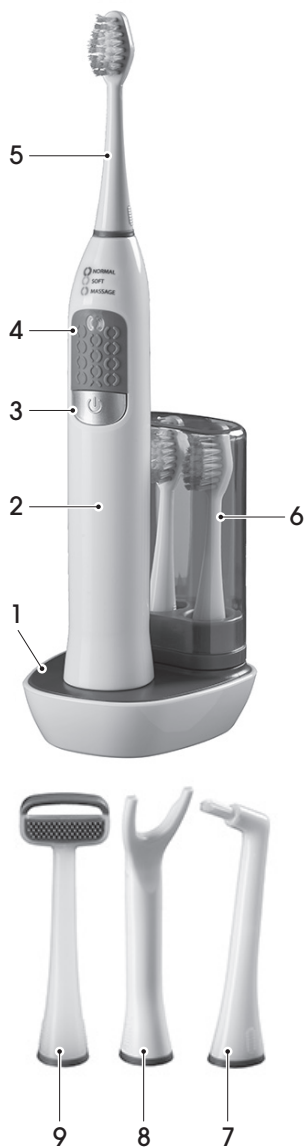

- 1 Laadstation**
- 2 Handvat**
- 3 Aan/uit-functietoetsen**
Functie 1 (rood) = Normal (30.000 bewegingen / min)
Functie 2 (geel) = Soft (40.000 bewegingen / min)
Functie 3 (groen) = Massage (30.000 bewegingen / min met korte intervallen)
Functie 4 = UIT
- 4 Led-functieweergave** (laadcontrole-led en bedrijfsmodus-indicator)
- 5 Opzetborstel** (blauw) Vervangende opzetborstels (rood en groen) bij de levering inbegrepen
- 6 Deksel voor het hulpstukkenvak**
- 7 Tandtussenruimteborstel**
- 8 Tandzijdehouder**
- 9 Tongborstel**
- **Gebruiksaanwijzing / Garantiebewijs**

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Uitpakken

Neem het artikel en de accessoires uit de verpakking.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal zorgvuldig en wikkel het netsnoer helemaal af.

Controleer of de levering compleet is en of er niets beschadigd is. Als de levering niet compleet is of als delen ervan beschadigd zijn, neemt u contact op met de verkoper.

Controleer voordat u het artikel de eerste keer gebruikt, of de aangegeven spanning op het typeplaatje overeenkomt met die in uw huis. Het typeplaatje zit op de onderkant van het laadstation.

Reinig het artikel voor het eerste gebruik met een licht bevochtigde doek, om mogelijke verpakkings- en productieresten te verwijderen.

Spoel de opzetborstels (**5, 7, 8** en **9**) onder stromend water af en veeg alle onderdelen droog.

Zet het laadstation (**1**) op een stabiele en vlakke ondergrond.

Eerste keer laden en volgende keren laden

Na de eerste ingebruikname wordt het volledige accuvermogen pas bereikt nadat de accu meer keren is opgeladen en ontladen.

Overladen van de accu is uitgesloten. Als de accu is opgeladen, pakt u het handvat van het laadstation en trekt u de netstekker van het laadstation uit het stopcontact.

Als de bewegingen van de opzetborstel merkbaar afnemen of er een lege accu op het handvat wordt weergegeven, moet de accu worden opgeladen.

Het is het beste voor het onderhoud van de accu, als u de accu pas weer helemaal oplaadt, als hij volledig ontladen is.

Voortdurend opladen vermindert de capaciteit van de accu.

OPMERKING! Afvoer van de accu

Voordat u de accu eruit haalt, moet het laadstation worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet en moet u de accu van het handvat volledig laten ontladen!

Voordat u het artikel wegdoet, moet de accu uit het artikel worden gehaald, zie onder **AFVOER**.

Sluit het laadstation (1) aan op een volgens de regels geïnstalleerde contactdoos en zet het handvat (2) zoals afgebeeld op het laadstation (afbeelding, zie pagina 7).

INFO! Laat het handvat (2) bij de eerste keer opladen ca. 24 uur op het laadstation (1) staan.

Voor elke volgende keer volledig opladen zijn 16 uur voldoende.

De led-functieweergave (4) knippert groen tijdens het laden. Als het laadproces is afgesloten, brandt de functieweergave (4) constant groen.

Het handvat (2) kan nadat het van het laadstation is genomen, pas na ca. 2 seconden worden ingeschakeld.

Een rood knipperende led-functieweergave (4) tijdens het gebruik of ca. 30 seconden lang na het uitschakelen, duidt op een lege accu. Afhankelijk van de restcapaciteit van de accu kan er nog enkele malen gepoetst worden. Laad het handvat

(2) gedurende ca. 16 uur op. Het is normaal dat het handvat tijdens het opladen warm wordt.

Het laden gebeurt via inductie en kan door metalen voorwerpen in de buurt van het laadstation worden belemmerd. Houd een minimumafstand van het laadstation tot metalen voorwerpen aan van 10 cm.

Koppel het laadstation los van het elektriciteitsnet, zo gauw het laadproces is afgerond.

BEDIENING

Steek de opzetborstel (5) zoals afgebeeld recht op het handvat (2). Om de opzetborstel van de tandenborstel eraf te nemen, trekt u deze recht van het handvat af.

Maak de borstel vochtig en doe er tandpasta op.

Stel de tandenborstel pas in werking, als de borstel zich in de mond bevindt.

Door herhaaldelijk op de Aan-/uitfunctietoets te drukken (3) kunt u de volgende functies inschakelen:

Functie 1 = Normal (30.000 bewegingen / min, de led-functieweergave (4) brandt rood)

Functie 2 = Soft (40.000 bewegingen / min, de led-functieweergave (4) brandt geel)

Functie 3 = Massage (30.000 bewegingen / min met korte intervallen, de led-functieweergave (4) brandt groen)

Functie 4 = UIT

INFO!

Functie 1, 2 en 3: De tandenborstel trilt en houdt telkens na ca. 30 seconden een korte pauze. Als u uw tanden in 4 poetsgedeelten onderverdeelt en elk gedeelte 30 seconden poetst, bereikt u de aanbevolen, gelijkmatige poetsduur van 2 minuten. De tandenborstel schakelt na 2 minuten uit en kan zo nodig opnieuw worden gestart.

Functie 4: Tandeborstel uit. De tandenborstel kan door herhaaldelijk op de Aan-/uitfunctietoets (3) te drukken vanuit elke functie worden uitgeschakeld.

Gebruik de oplaadbare tandenborstel niet als een gewone tandenborstel.

Poets niet met een sterke druk!

De beste reinigende werking bereikt u, als u de borstel van de oplaadbare tandenborstel alleen met een lichte druk over het tandoppervlak leidt.

Tandtussenruimteborstel

INFO!

Met deze borstelkop kunnen vrij liggende tandworteltussenruimtes, de kauwvlakken van kiezen of tandprothesen/beugels worden gepoetst. Bij vrij liggende tandworteltussenruimtes raadpleegt u voor het gebruik uw tandarts.

Het opsteken en afnemen van de tandtussenruimteborstel (7) gebeurt net als onder **borstelkop tandenborstel** is beschreven. Stel de tandenborstel pas in werking, als de borstel zich in de mond bevindt.

Doe een beetje tandpasta op de bevochtigde borstel en leid deze zonder vaste druk over de delen die moeten worden gepoetst.

Tandzijdehouder

Het opsteken en afnemen van de tandzijdehouder (8) gebeurt net als onder **borstelkop tandenborstel** is beschreven.

Neem een ca. 10 cm lang stuk van een in de handel verkrijgbare tandzijde en wikkel eerst het ene einde

3 tot 4 keer rond het wielkje onder de beugel.

Leid de tandzijde strak over de beide beugels en wikkel het andere einde vervolgens opnieuw 3 tot 4 keer om het wielkje.

De tandzijde moet tussen de beide beugels gespannen zijn en mag bij het poetsen van de tandtussenruimte niet losgaan.

Leid de tandzijde met uitgeschakelde tandenborstel tussen twee tanden in, schakel de tandenborstel in (functie 1 (rood) of 2 (geel)) en poets alle tandtussenruimtes door op en neer te bewegen.

Tongborstel

Het opsteken en afnemen van de tongborstel (9) gebeurt net als onder **borstelkop tandenborstel** is beschreven.

Breng een mild mondhygiënisch product aan op de borstelkop.

Leid de tongborstel met uitgeschakeld handvat over de bovenkant van de tong en spoel uw mond vervolgens goed met water.

Na het gebruik

Trek de borstelkop van het handvat (2) af en spoel deze grondig onder stromend water. Klop hem vervolgens met de opnameopening krachtig tegen een handdoek en droog hem af.

INFO!

Let erop, dat de tandenborstelkop liefst snel kan drogen. Leg hem in geen geval in water om hem te bewaren.

Houd het handvat (2) met de opnameopening van de borstelkop naar beneden kort onder stromend water en droog de opnameopening en het handvat vervolgens af.

⚠ WAARSCHUWING!

Het laadstation mag niet in water of andere vloeistoffen worden gedompeld. Gevaar voor een elektrische schok!

Reinig het laadstation (2) alleen met een vochtige doek en zorg ervoor, dat het helemaal droog is, voordat u het opnieuw op het elektriciteitsnet aansluit.

Inschakelbeveiliging tijdens het transport

OPMERKING!

Om ongewild inschakelen, bijv. tijdens het vervoer in een koffer te vermijden, kan de Aan-/uitfunctietoets (3) gedeactiveerd worden.

Druk in uitgeschakelde toestand op de Aan-/uitfunctietoets (3) en houd die ten minste 5 seconden ingedrukt. De tandenborstel kan nu niet meer worden ingeschakeld door op de Aan-/uitfunctietoets (3) te drukken.

Activeer de Aan-/uitfunctietoets (3) door opnieuw ten minste 5 seconden op de functietoets te drukken.

Als alternatief kan de toets ook worden geactiveerd als deze op het op-laadstation wordt gezet dat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Kort erop zetten is hierbij al voldoende. Let op de korte vertraging (2 seconden) voor het inschakelen.

VERVANGENDE BORSTEL- KOPPEN VOOR TANDEN- BORSTELS

Wij adviseren om de opzetborstels na 3 maanden te vervangen. Opzetborstels van tandenborstels zijn slijtdelen en vallen niet onder de garantievoorwaarden!

Nieuwe opzetborstels kunt u bij het servicecenter bestellen. U hoort daar wat de prijs incl. btw is en hoe hoog de verzendkosten zijn.

De contactgegevens vindt u in het garantiebewijs.

STORING EN REMEDIE

Werkt niet

Accu leeg? Zet het handvat op het laadstation en sluit de netstekker aan.

Inschakelbeveiliging geactiveerd? Deactiveer de inschakelbeveiliging, zie **Inschakelbeveiliging tijdens het transport**

Ld-functieweergave geeft het laadproces niet aan

Laadstation aangesloten? Sluit de netstekker aan op het elektriciteitsnet.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Laadstation

Netspanning:

100-240 V ~, 50/60 Hz

Vermogensopname:

1,6 W

Beschermingsklasse:

II / □

Beschermingsgraad:

IP67

Handvat

Accu:

2 x 1,2 V, 600 mAh (Ni-MH)

Bedrijfsduur (accu vol):

ca. 50 minuten

Functie 1:

30.000 bewegingen / min

Functie 2:

40.000 bewegingen / min

Functie 3:

30.000 bewegingen / min met korte intervallen

Timer:

0,5 seconden onderbreking na ca. 30 seconden Uitschakeling na 2 minuten

Omdat onze producten voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd worden, zijn wijzigingen in het design en technische veranderingen mogelijk.

CE CONFORMITEITS- VERKLARING

De conformiteit van het product met de wettelijk voorgeschreven normen wordt gewaarborgd.

De volledige conformiteitsverklaring vindt u op het internet op **www.gt-support.de**.

Deze gebruiksaanwijzing kan ook als Pdf-bestand van onze Homepage **www.gt-support.de** worden gedownload.

AFVOER

De accu's eruit halen

⚠ WAARSCHUWING! Voordat de accu eruit wordt gehaald, moet het laadstation worden losgekoppeld van het stroomnet en moet de accu in het handvat volledig kunnen ontladen! Nadat de accu eruit is gehaald, is het handvat vernield en kan het niet meer worden gerepareerd.

Houd het handvat in uw hand.

Zet een passende munt in de gleuf op de bodem van het handvat en draai de bodem tegen de richting van de wijzers van de klok, om hem te openen.

Trek de accu's uit het handvat en knip de kabel eventueel door.

Afvoer van verpakking en apparaat

Om gevaar voor het milieu te vermijden, gooit u de verpakking en het artikel soort bij soort weg.



Het artikel mag niet met het huisvuil worden weggegooid.

Als het artikel niet meer gebruikt kan worden, vraagt u de bevoegde afvalverwijderingsinstelling naar de noodzakelijke maatregelen om het te verwijderen.

Om gevaar door een defect artikel te vermijden, snijdt u het netsnoer door, voordat u het wegdoet.



WAARSCHUWING! Voordat u het netsnoer doorsnijdt, mag u niet vergeten de stekker uit het stopcontact te trekken. Levensgevaar door een elektrische schok!



Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil!

Elke gebruiker is wettelijk verplicht, batterijen en accu's bij een inzamel-punt van zijn gemeente, zijn wijk of in de handel af te geven.

Alle batterijen en accu's kunnen daardoor milieuvriendelijk worden verwijderd.

KLANTENSERVICE

 0900 / 44 666 44

 gt-support@teknihall.be

ART.-NR. 7573

09W0/2016

Verkocht door

(geen serviceadres!):

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstr. 19
20095 Hamburg, Germany